



L'exigence mène à l'excellence !

CATALOGUE GÉNÉRAL



SCANNEZ-MOI
POUR TÉLÉCHARGER
CE CATALOGUE



Quatre en un

Ultracare Pro
Détartreur et polisseur à air

Nettoyage en quatre dimensions contrôlé par un seul appareil

- ✓ Traitement ultrasonique du canal radiculaire
- ✓ Traitement parodontal à ultrasons confortable et indolore
- ✓ Traitement de sablage pour le contrôle de la plaque dentaire
- ✓ Sablage à l'oxyde d'aluminium

Un seul appareil couvre tous les scénarios de soins bucco-dentaires, éliminant ainsi les tracas liés au passage d'un instrument à l'autre

Reconnaissance automatique de la poignée

Identifie automatiquement le type de poignée, en commutant les fonctions sans réglage manuel, ce qui réduit le risque de mauvais fonctionnement et améliore l'efficacité.





Accès instantané Contrôle précis

Faites glisser pour régler la puissance/le débit d'eau/la température de l'eau

Visualisation des paramètres pour un fonctionnement fluide



Contrôle intelligent de la température pour un confort accru

Système intelligent d'alimentation en eau chaude : adieu au choc thermique à l'eau froide.

La température douce de l'eau protège les gencives sensibles, rendant ainsi l'expérience de traitement plus agréable



Traitement ultrasonique du canal radiculaire

- Ondes à haute fréquence pour l'élimination des débris et des infections
- Nettoyage en profondeur pour améliorer les taux de réussite
- Minimise les dommages aux dents adjacentes
- Convient à l'irrigation et à d'autres procédures.



Réparez l'accès à la chambre pulpaire, explorez le canal radiculaire calcifié et retirez les pierres dentaires incrustées.



Placez les biocéramiques MTA.



Chirurgie apicale : implique une préparation apicale inversée et la mise en place de matériaux de remplissage inversés.



Pression de vibration ultrasonique pour les applications dentaires.



Activez l'hypochlorite de sodium.



Retirez les instruments cassés du canal radiculaire, y compris les tenons du canal radiculaire, les pointes d'argent, le métal fracturé et d'autres débris.



Traitement parodontal à ultrasons confortable et indolore

- Conception brevetée de la poignée pour les longues séances
- Alimentation en eau indépendante pour les médicaments acides et alcalins
- Suivi automatique de la fréquence avec identification intelligente de l'insert
- Compatible avec plus de 60 inserts ultrasoniques pour divers besoins
- Convient aux traitements supragingivaux et sous-gingivaux



Avant ▶



Après ▶





Contrôle de la plaque dentaire

Traitement de sablage

- Filtration de l'air en plusieurs étapes pour éviter l'humidité dans l'air comprimé
- Conception brevetée de la poignée avec rotation à 360 degrés, sans obstruction
- Conception progressive de la buse pour un sablage concentré
- Tuyaux d'eau et d'air durables et flexibles
- Tuyaux résistants à haute pression (0,6 MPa) pour les dépôts tenaces
- Nettoyage à un bouton pour les circuits d'eau et d'air

Nettoyage en un clic

- L'entretien est plus pratique grâce au nettoyage en un clic
- Panneau tactile tout-en-un pour un nettoyage facile
- La conception de l'interface est simple, conviviale et attrayante

Avantages

Protège efficacement la surface des dents

La poudre présente une faible dureté, ce qui évite d'endommager la dentine pendant le détartrage


Plus efficace pour éliminer la plaque dentaire

Le sablage peut accéder et nettoyer les zones inaccessibles telles que les brackets orthodontiques et les surfaces occlusales

Réduction de la plaque et de la pigmentation

Les dents nettoyées par sablage sont plus résistantes à l'accumulation de plaque dentaire ou de pigments indésirables

Comparaison de la dureté des poudres et de la dentine

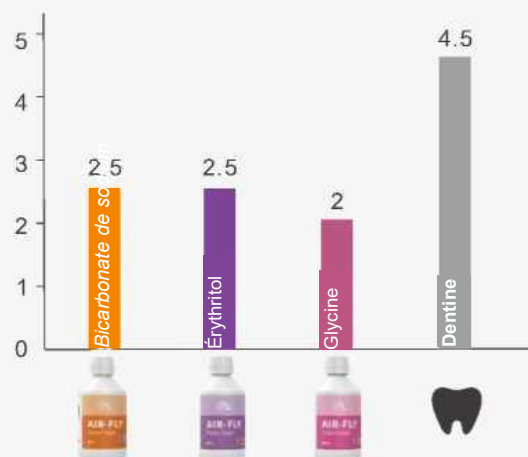

Angle recommandé : 30°-60°



Distance recommandée : 3-5 mm



Sablage à l'oxyde d'aluminium

La poudre de sablage à l'alumine peut agir sur toutes les restaurations entièrement céramiques (facettes, oxyde d'aluminium), les restaurations métalliques (chrome diamant, alliage)

Traitement de surface par mordançage pour maximiser la zone de liaison et améliorer l'adhérence

Permet l'élimination complète de l'adhésif pour fond de maille pour les brackets orthodontiques

AP-1

Poudre abrasive à l'oxyde d'aluminium

AluSparkle®



Aucune absorption d'eau, ni de blocage, hautement efficace

Parfaite pour travailler sur la surface des couronnes, les inserts et les attaches orthodontiques

Poudre de **27 microns** pour une étanchéité immédiate de la dentine afin d'améliorer la force de liaison pour les restaurations indirectes, les couronnes, les inlays et les onlays

Sable de **50 microns** pour la restauration de la céramique et de la porcelaine, comme les facettes en porcelaine ou les inlays

Sable de **90 microns** pour les restaurations en métal et en zircone telles que les brackets orthodontiques, les bases d'implants et les restaurations en zircone

Fonctionnement sans obstruction

La conception unique de la buse empêche les blocages, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du travail. Elle inhibe efficacement la diffusion de la poudre de sable et empêche la réabsorption de la vapeur d'eau

Buses en alliage de carbure de tungstène

Conçues pour une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l'usure

Sablage de précision

La buse peut être tournée à 360°, ce qui permet une pulvérisation facile sous n'importe quel angle. Elle est détachable pour faciliter le nettoyage et l'entretien



Composant du produit





FRÉDÉRIC NOIR

18 rue de la Duchesse de Chartres
60500 Vineuil-Saint-Firmin

Tél. +33(0)3 44 58 52 72

Mobile +33(0)611 417 010

contact@nf-diffusion.com

