


PX-A

Systeme Duo Polisseur et Détartreur




Introduction

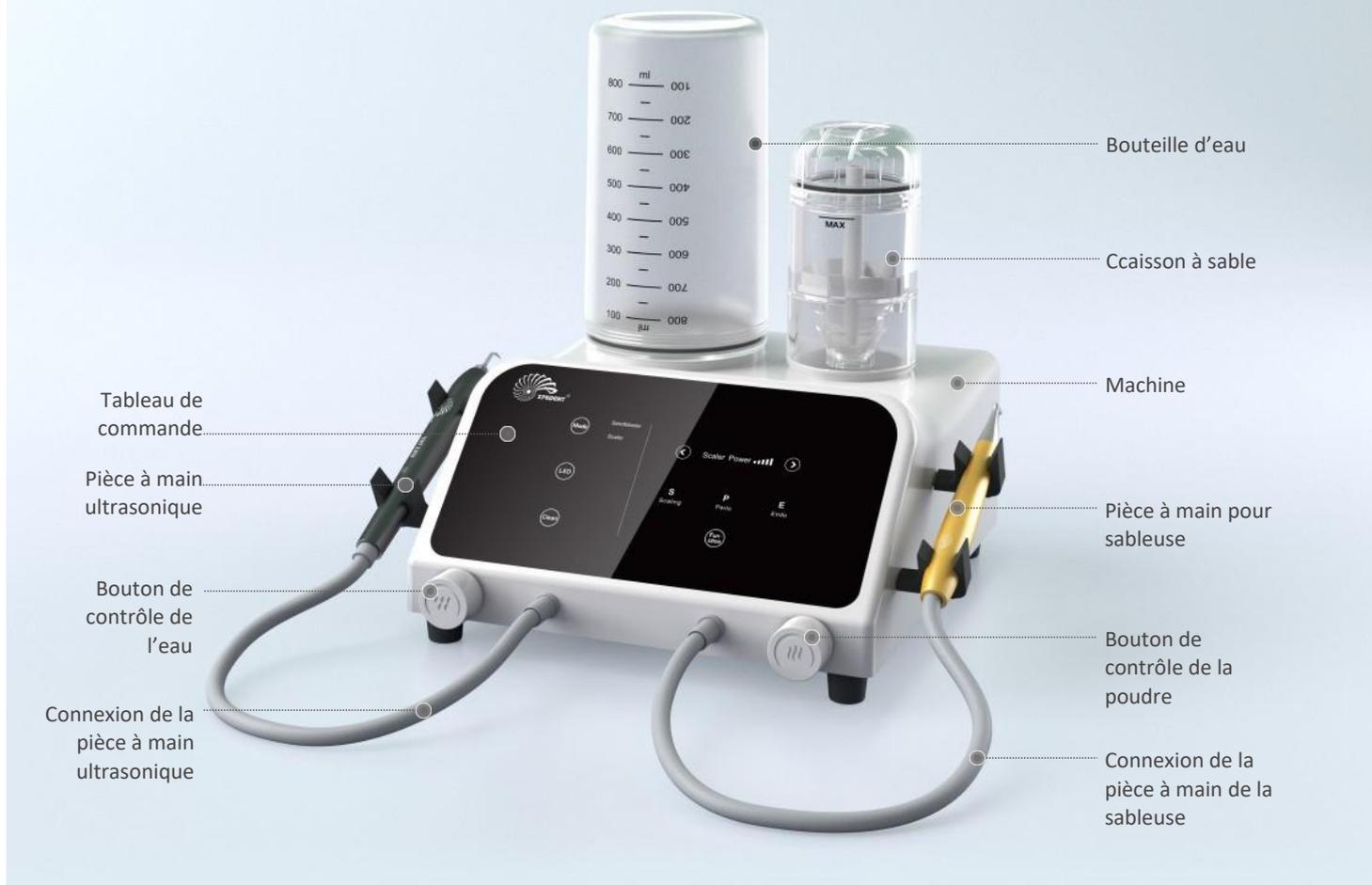

Polissage, traitement parodontal traitement endodontique et nettoyage des implants Quatre en un

La buse est progressivement effilée et sablée de manière plus intensive

- > La buse est progressivement effilée et sablée de manière plus intensive
- > La tuyauterie interne peut résister à une pression de 0,6 MPa, suffisante pour éliminer les dépôts tenaces

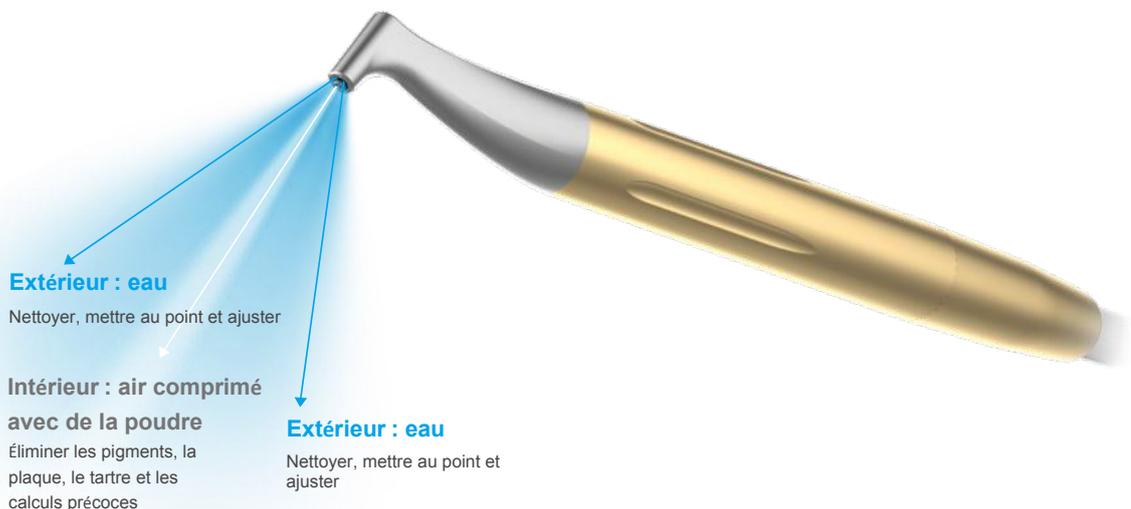

La conception de la pièce à main de la sableuse à deux étapes réduit les liaisons intermédiaires et empêche la poudre de *polissage* de s'accumuler et de s'agglomérer

> Conception de haute précision, petite et fine, prise en main confortable et débit de sable précis, permettant également d'éviter la perméabilité mutuelle de l'eau et du gaz

> Le sablage à l'eau réduit la pollution par la poussière



Anti-blocage


Séparation gaz-eau

Séparateur Air - Eau Système de filtration

> Livré avec un filtre facilement remplaçable, il permet de garder l'air sec

> La filtration de l'air en plusieurs étapes empêche l'eau de pénétrer dans le

> caisson à sable. La sortie en position reculée réduit les blocages

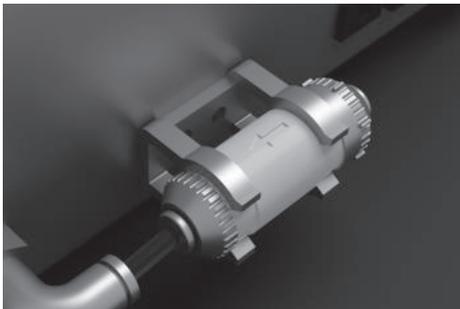


Anti-blocage

La sortie en position reculée

Rotation à 360°

> Conception brevetée de la pièce à main, rotation libre à 360 degrés

> Fonctionnement facile ; l'eau et l'air peuvent être réglés librement

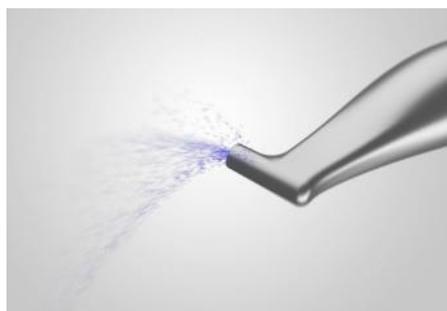

**360°
Rotation**

Utilisation facile de la buse

Bocal de Poudre en forme d'entonnoir

> Caisson à sable en forme d'entonnoir et table de ponçage

> Installation et remplacement de la poudre faciles



Table de ponçage


Caisson à sable en forme d'entonnoir

Nettoyage en un clic

> L'entretien est plus pratique en raison du nettoyage en un clic.



- > Panneau tactile tout-en-un pour un nettoyage facile
- > Conception d'interface simple, conviviale et agréable

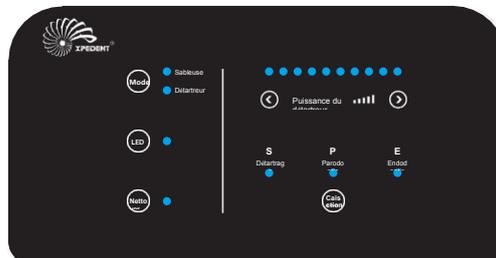

Avantages

> Il protège efficacement la surface des dents

La poudre peut protéger les dents pendant le détartrage, dans la mesure où elle présente une faible dureté. De plus, elle peut également améliorer le confort du patient


> Plus efficace pour éliminer la plaque

Le sablage peut finir les endroits qui ne sont pas faciles à nettoyer, comme les attaches orthodontiques, les surfaces occlusales et les dents fendues, etc.


> Réduction de la plaque et de la pigmentation

La plaque et la pigmentation ne colleraient pas facilement aux dents si elles sont finies par un sablage

Comparer avec d'autres poudres et avec la dureté en Mohs de la dentine

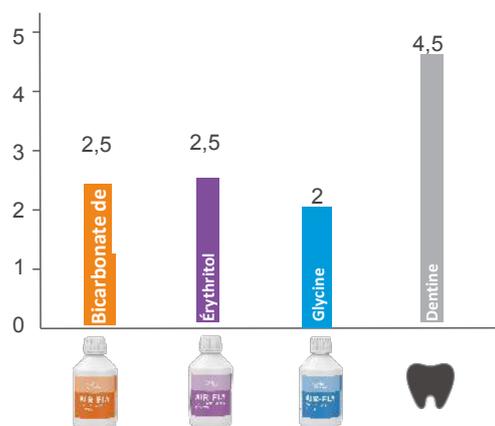

Fonctionnement du sablage

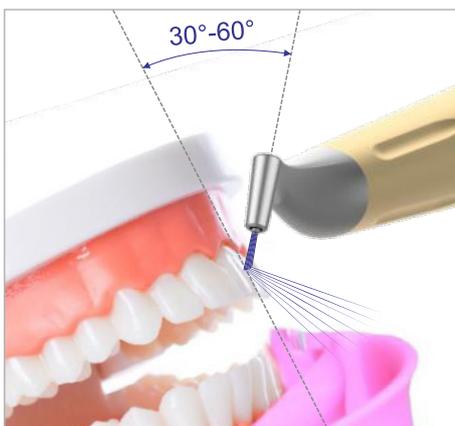

Angle recommandé : 30°-60°



Distance recommandée : 3-5 mm

Dispositif de traitement parodontal à ultrasons confortable

Le système intelligent identifie les pointes


- > La technologie de traçage automatique et la puce intelligente identifient les pointes
- > Correspondance parfaite pour plus de 60 styles de pointes, répondant à de nombreux besoins cliniques
- > Conception brevetée de la pièce à main, qui ne chauffe pas pendant une utilisation prolongée



POI
Le système intelligent identifie les pointes

Traitement parodontal confortable pour les organes sous et supra-gingivaux

- > Irrigation du canal radiculaire, élimination des aiguilles cassées, élimination des calcifications, résection apicale et remplissage du canal radiculaire inversé
- > Élimination des cavités par ultrasons, finition des facettes, préparation des dents et polissage des bords
- > Nettoyage des implants, retrait des couronnes et des facettes

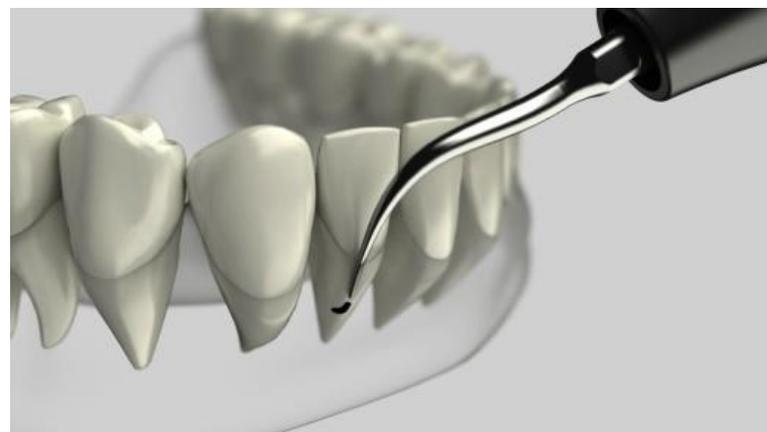

Avant ▶



Après ▶



Alimentation en eau

- > Des additifs peuvent être utilisés dans la bouteille d'eau



Configuration de luxe

Configuration standard

Machine	1	Pédale	1
Bouteille	1	Clé	1
Caisson à sable	1	Clé pour endodontie	1
Pièce à main	1	Poin	11
Pièce à main de la sableuse	1	Fichiers	4
Ligne	1	Boîte autoclave	1

Accessoires pour l'entretien

Tuyau de 6 × 4 mm (Comprend un connecteur à prise rapide de 0,3 m)	2	Raccordement en T 8-6	2
Tuyau de 6×4 mm (Comprend un connecteur à prise rapide de 3 m)	1	Nettoyant pour pièce à main de	1
Tuyau de 4 x 2,5 mm	1	Tube de protection	2
Filtre	2	Joint	10
Raccordement en T 8-6	2		

INSERTS

										
P50L	P50R	P52	P53L	P53R	P56	TICP	TG4	E1	15#	20#
2 + 2	2 + 2	2 + 2	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	+ 2	1 + 1	2 + 2	2 + 2



Résidence de Virgile - B4
18 rue de la Duchesse de Chartres 60 500
Vineuil-Saint-Firmin
Mobile: +33 (0) 611 417 010
mail: contact@nf-diffusion.com